


# Výsledky z testování spektrometru Avanta PM Superlamp

Prvek: Pb, Superlampa


Počet opakování: 5

Doba integrace: 5 s

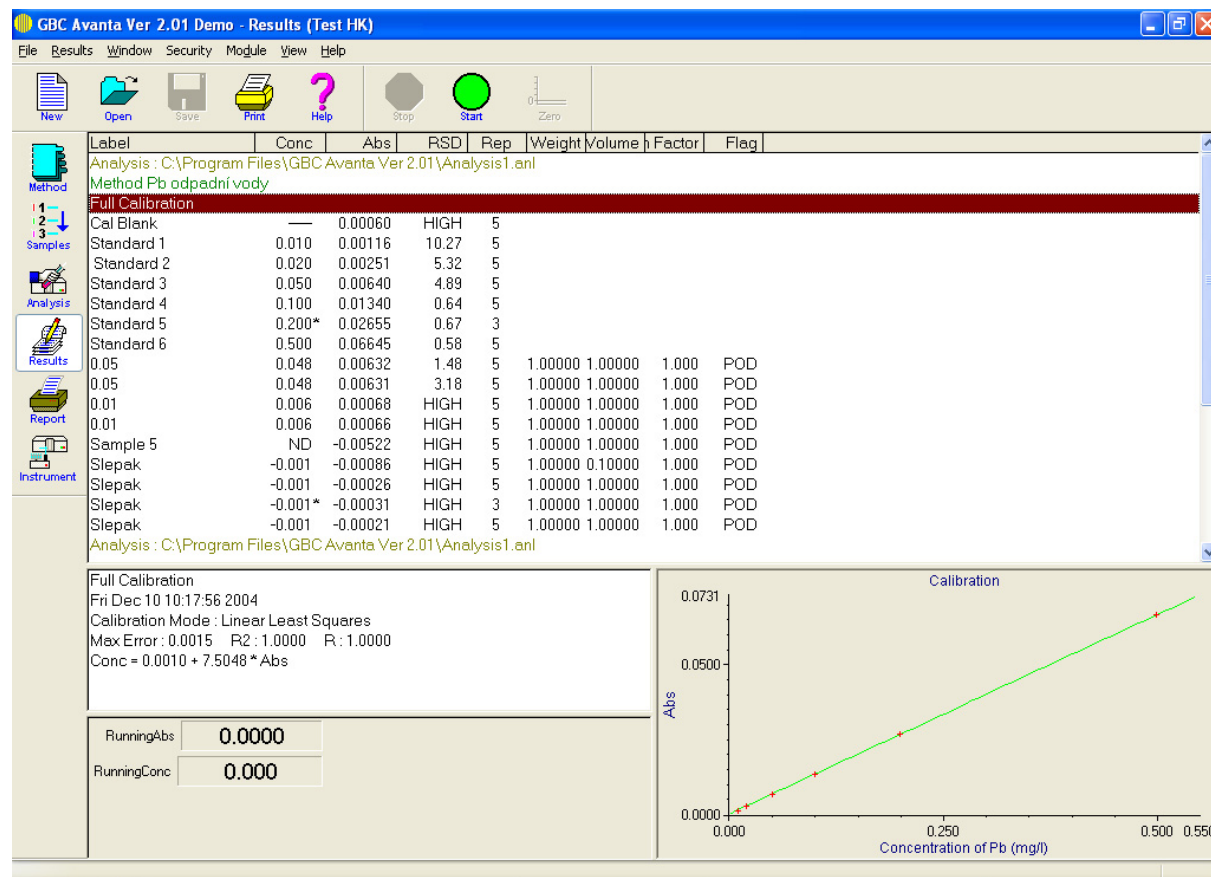


3s DL slepého pokusu	3s DL nízké koncentrace
0,004 mg/l	0,003 mg/l

**Prvek: Cu**  
**Počet opakování: 3**  
**Doba integrace: 2 s**

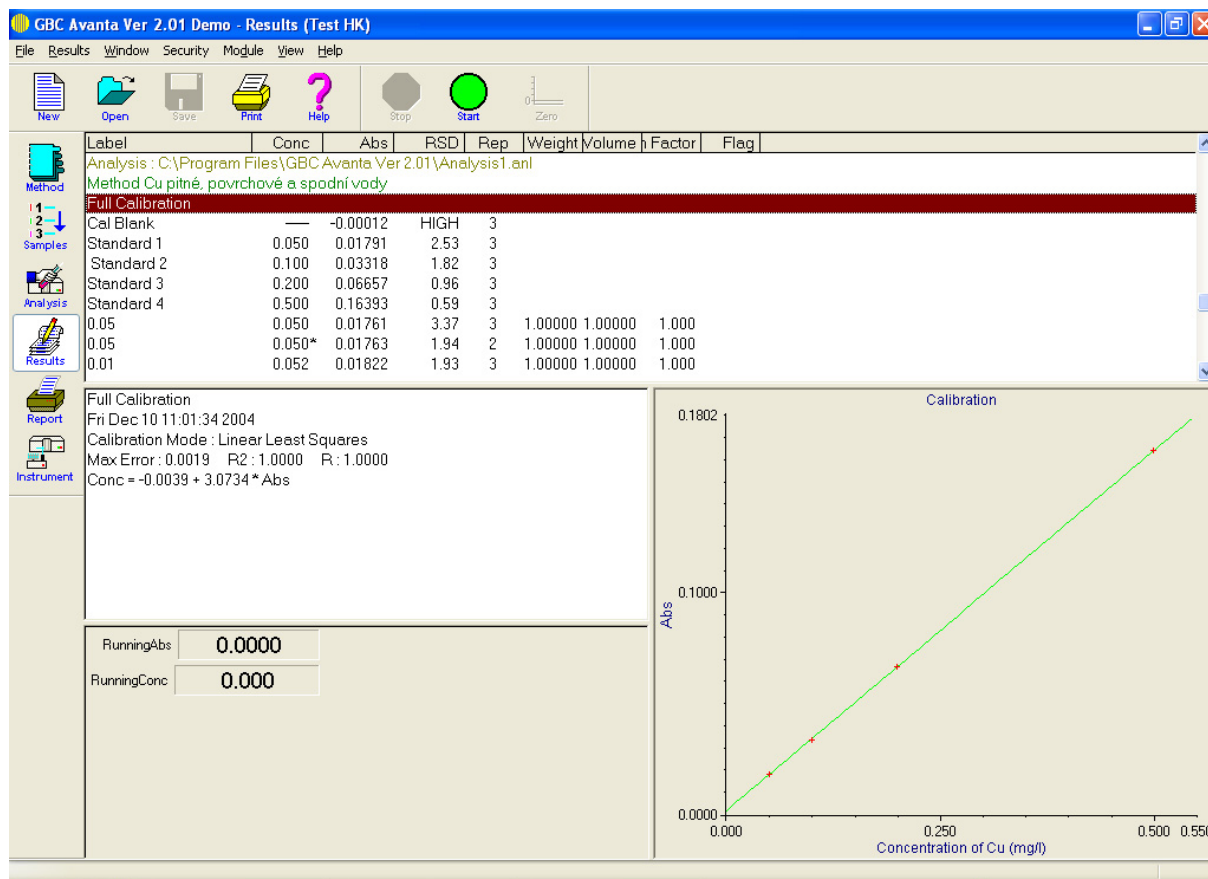


3s DL slepého pokusu	3s DL nízké koncentrace
0,0041 mg/l	0,0038 mg/l

**Prvek: Cd**  
**Počet opakování: 3**  
**Doba integrace: 4 s**

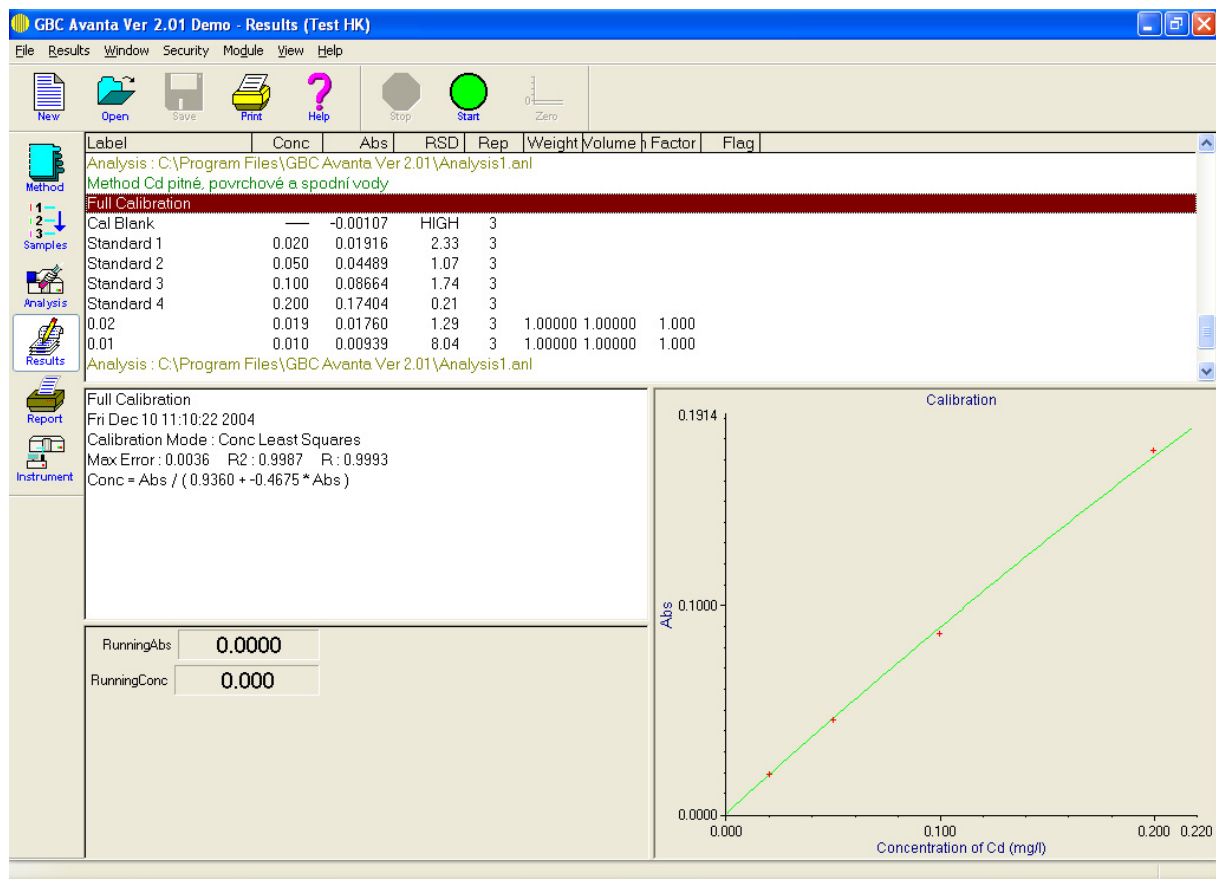

3s DL slepého pokusu	3s DL nízké koncentrace
0,0014 mg/l	0,0014 mg/l

Prvek: Cr  
 Počet opakování: 3  
 Doba integrace: 4 s

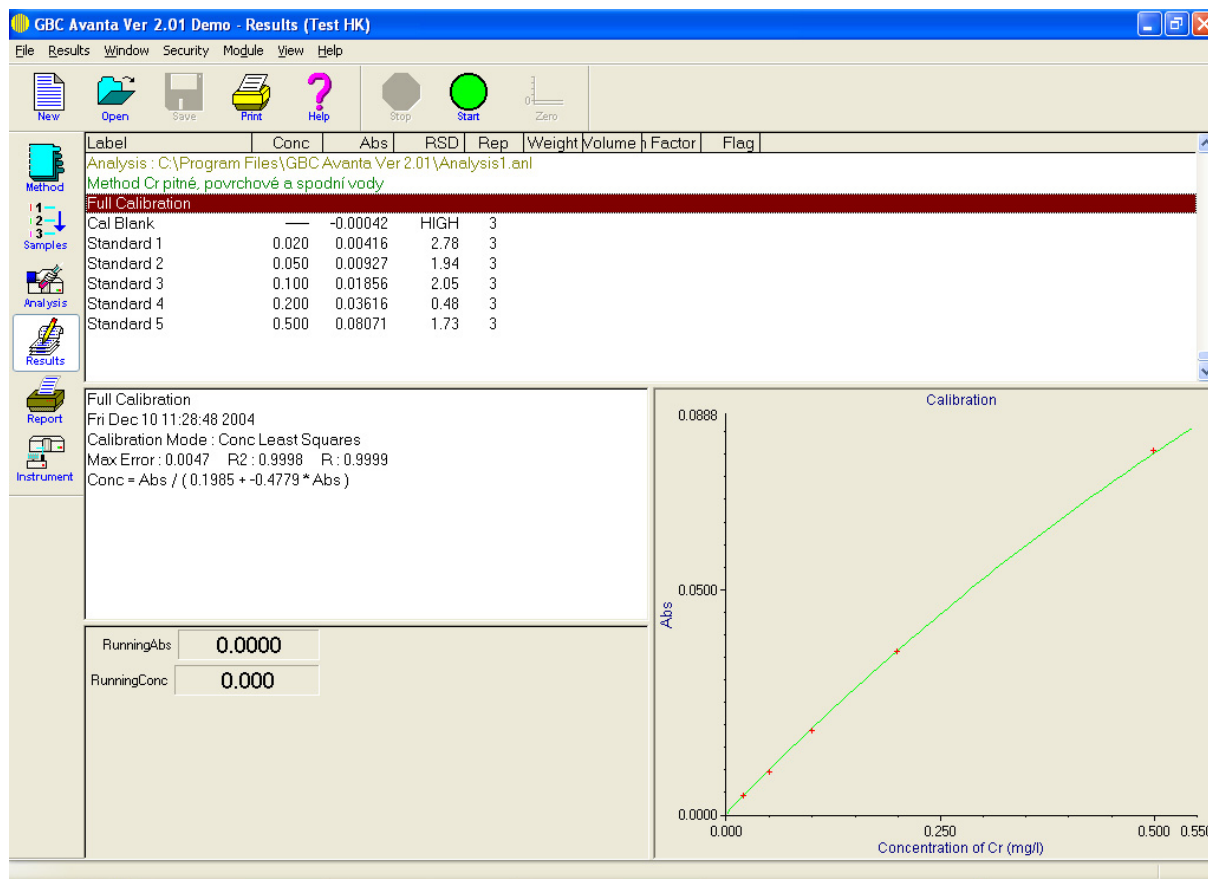

3s DL slepého pokusu	3s DL nízké koncentrace
0,003 mg/l	0,0017 mg/l